

# ClutchCutter

## DP2618DT

Fórceps de agarre de uso único



- Dientes
- Dientes con rotación
- Borde externo con

# Incisión, disección y coagulación... El ClutchCutter: su herramienta de disección submucosa endoscópica 3 en 1.

Nuestro fórceps de agarre giratorio de uso único ayuda a realizar una disección submucosa endoscópica más eficiente y segura.

## Características

- **Dientes aserrados**

para agarrar firmemente la mucosa.

- **Dientes con rotación**

para aproximarse a la lesión en ángulos precisos.

- **Borde externo aislado**


para reducir al mínimo el riesgo de daño en el tejido local.




## Especificación

Línea de corte longitudinal diatérmica	DP2618DT con línea de corte longitudinal diatérmica de uso único	
Identificador	-35-	-50-
Longitud de los dientes	3.5 mm	5.0 mm
Longitud de trabajo	1800 mm	
Diámetro máximo de la porción de inserción	2.7 mm	
Diámetro del canal para fórceps de un endoscopio compatible	2.8 mm o más	

[Nota] No todos los endoscopios que tengan la longitud de trabajo y el diámetro de canal para fórceps indicados arriba son compatibles.

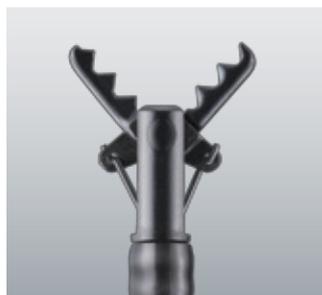

DP2618DT-35-

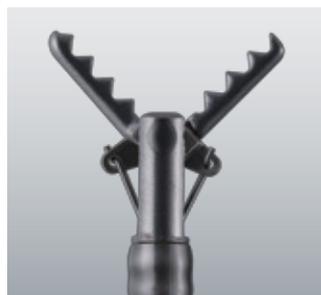

DP2618DT-50-




Nombre del producto: Línea de corte longitudinal diatérmica  
Código GMDN: 38817

Nombre genérico: Electrodo del sistema diatérmico electroquirúrgico para endoterapia de uso único

## Procedimientos


### Incisión

Agarre la membrana mucosa con los dientes aserrados, levante y haga una incisión.

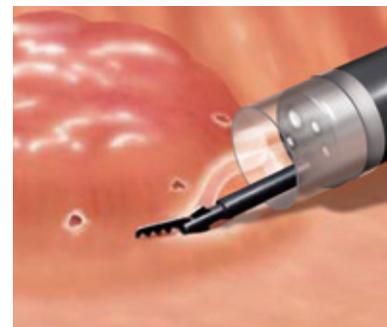

### Disección

Agarre la submucosa, tire, confirme la posición y diseccione.

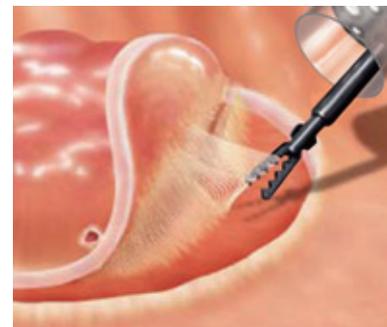

### Coagulación

Coagule cualquier lugar que sangre con los dientes de alta frecuencia.

