



## Conectando Pacientes y Médicos



**GRIENSU S.A.**  
**Medical IT**



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

# Plataforma Cloud



Medportal Patient  
Medportal Physician  
Medportal Uni-Viewer  
Medportal Teleradiology  
Medportal Archive  
Medgate Dicom  
Medgate Non-Dicom



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD



1



### Patient Web Portal

Acceso a exámenes de Radiología, Laboratorio y otras especialidades, online.

Acceso a reportes y otros informes. Compatible con cualquier browser y dispositivo móvil.

Reciba notificaciones por correo electrónico o sms cuando el examen y el informe estén disponibles en línea. Exámenes e historial de informes, Compartir examen e informes con médicos externos.

2



### Physician Web Portal

Para Médicos de Referencia:  
Acceso a exámenes de Radiología, Laboratorio y otras especialidades, online.

Acceso a reportes y otros informes. Compatible con cualquier browser y dispositivo móvil

Los médicos de referencia pueden tener acceso solo a los exámenes a los que se hace referencia en su dispositivo móvil y pueden recibir notificaciones cuando el examen y el informe estén disponibles.

3



### Zero Footprint Uni-Viewer

Para exámenes de radiología y otros. Se integra con PACS, RIS, HIS y VNA. Compatible con DICOM y HL7.

Vea desde cualquier browser, cualquier imagen de CT, MG, MRI, CR, DR, US, endoscopia, ECG, EEG, Holter, OCT, etc.

Soporte multi-idomas.

El HIS o portal del Hospital puede llamar a **Univiewer** a través de un enlace URL para acceder a las imágenes e informes.



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD



4



### **Teleradiology Cloud Portal.**

Conéctese a la NUBE y seleccione cualquier examen de radiología de cualquier PACS de cualquier hospital y brinde acceso a cualquier radiólogo para informar desde cualquier lugar. Una sola interfaz de teleradiología en la nube se puede conectar a múltiples PACS y administrar todo el flujo de trabajo de teleradiología. Soporte en varios idiomas.

5



### **DICOM GATEWAY / ROUTER**

Flexible y poderoso DICOM Gateway. Permite realizar DICOM Q/R SCU, DICOM Store SCP, DICOM STORE SCU, DICOM WL SCP, DICOM Forward, etc. Rutee desde cualquier fuente DICOM y reenvía a múltiples destinos. Reciba mensajes HL7 como orden para consultar cualquier examen de PACS y enviarlo a cualquier destino de Dicom. Puede importar exámenes de CD y otras fuentes y enviarlos a PACS, cambiando algunas Dicom TAGS.

6



### **VNA GATEWAY - Non-DICOM**

Integre cualquier dispositivo que no sea Dicom con VNA o directamente en MEDPORTAL. Integre exámenes de múltiples departamentos como Dermatología, Oftalmología, ORL, Cardiología y todos los de "ología". Una forma sencilla de tener ECG, Holters, pruebas de estrés, OCT, ECT, EEG, fotos dermatológicas en un único archivo y un solo visor. Adquiera archivos en formato original como PDF, JPEG, BMP, MPEG, etc.



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

7



### MEDCD Software

**MedCD** es un software para grabar imágenes DICOM en un robot de CD / DVD con impresión de etiquetas utilizando una interfaz fácil de usar. La orden de grabación puede iniciarse directamente desde cualquier modalidad de DICOM. Permite crear Etiqueta personalizada. Query & Retrive de PACS. Incluye informe PDF y DICOM Viewer. Acceso web desde cualquier PC o dispositivo móvil. Soporte en varios idiomas.

8



### MEDPRINT Software

**MedPrint** es un software para impresión DICOM en papel. Compatible con los estándares DICOM y HL7, imprime imágenes e informes en un solo documento en papel (folleto). El nombre de la institución, los datos del paciente y el diseño completo se pueden personalizar. MEDPRINT recibe imágenes en DICOM Store e Informe en formato PDF. Compatible con la impresora XEROX, Canon, Konica Minolta, OKI y otras impresoras de papel.

9



### MEDCRM – Service Portal

**MEDCRM** es un Portal de servicios para administrar todas las solicitudes de servicio relacionadas con todos los activos existentes en los hospitales y clínicas. Administre todo el inventario con información de SLA, solicitudes de servicio a proveedores e informes. Reciba alertas antes de que finalice el SLA o la garantía. Mida el tiempo de inactividad, el tiempo de respuesta y la calidad del servicio. Acceso desde cualquier dispositivo móvil.



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD



10



### **MIGRATION ENGINE**

Permite la migración de estudios e informes Dicom, cambio de etiquetas DICOM y validación de datos, limpieza de toda la información "sucia".

Reciba desde cualquier fuente DICOM y reenvíe a múltiples destinos.

Puede recibir el mensaje HL7 como orden para consultar cualquier examen de PACS y enviarlo a cualquier destino de Dicom.

11



### **REMOTE MONITOR**

Solución Cloud para monitorear cualquier servidor, PC o cualquier servicio remoto que se ejecute en cualquier S.O. Windows. Posibilidad de supervisar el espacio en disco, el uso de la CPU, la RAM, los servicios específicos de software importante en uso, la conexión a Internet, la conexión VPN, el estado de EPSON CD Robot, etc. Posibilidad de programar Folders Backup, SQL y Postgres Dump.



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

1



2



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD




1 2

- Portal WEB para el Paciente y Médico
- Imágenes y Reportes On-Line
- Mobility - compatible con browsers HTML5
- Totalmente integrado al PACS & RIS
- Multi Lenguaje, **Uni-Viewer** para imágenes y reportes
- Interface fácil y amigable, notificaciones email/sms




Visualizador No  
Diagnostico

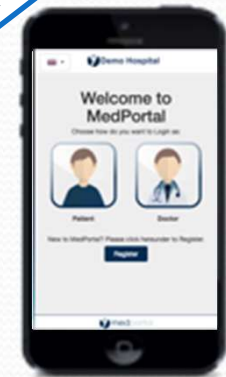

**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD






 medportal	PATIENT PORTAL	PHYSICIAN PORTAL
RADIOLOGY EXAMS	YES	YES
LAB RESULTS	YES	YES
ECG RESULTS	YES	YES
OCT	YES	YES
REPORTS (HTML & PDF)	YES	YES
VIDEOS	YES	YES



**GRIENSU**




TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

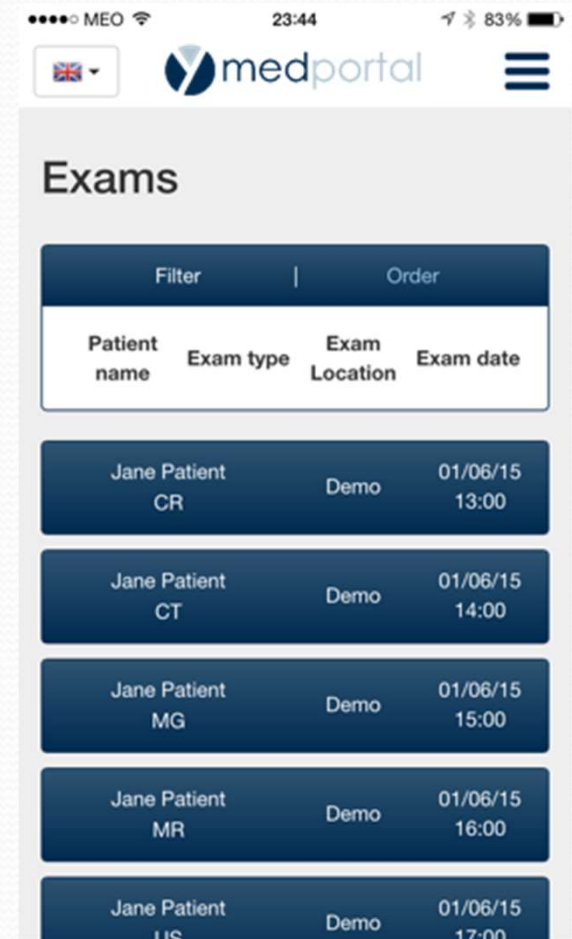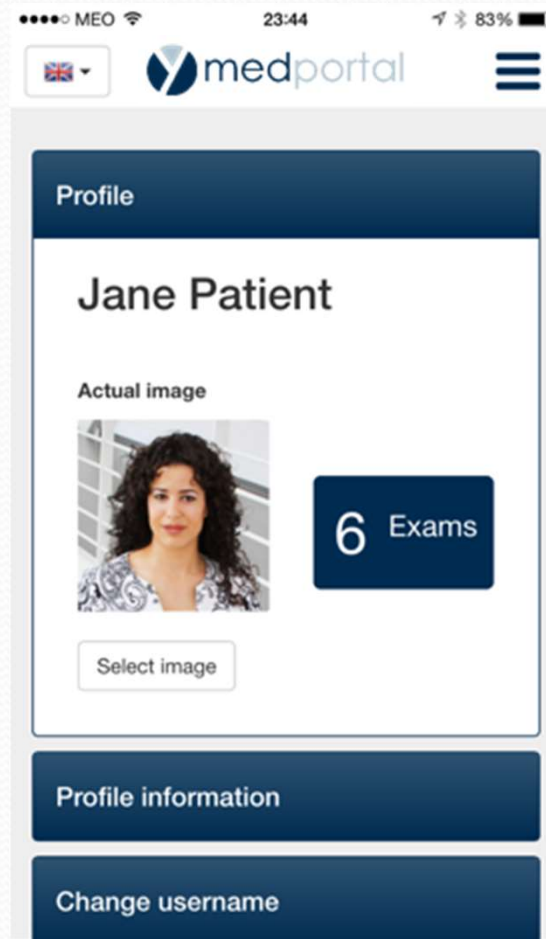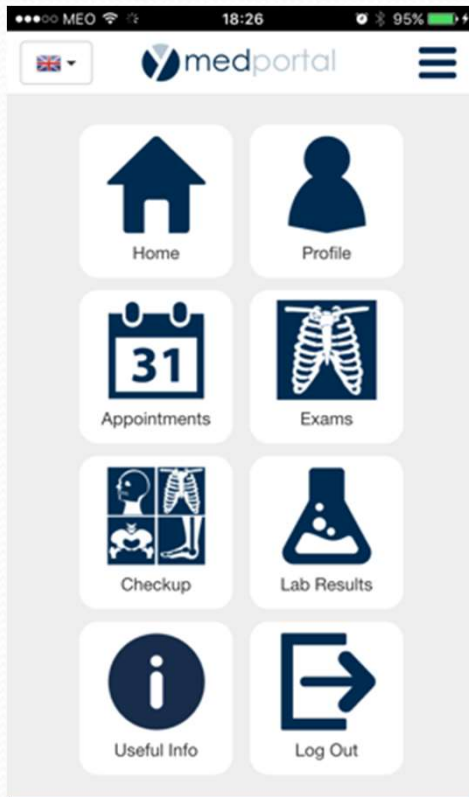

**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

1 2

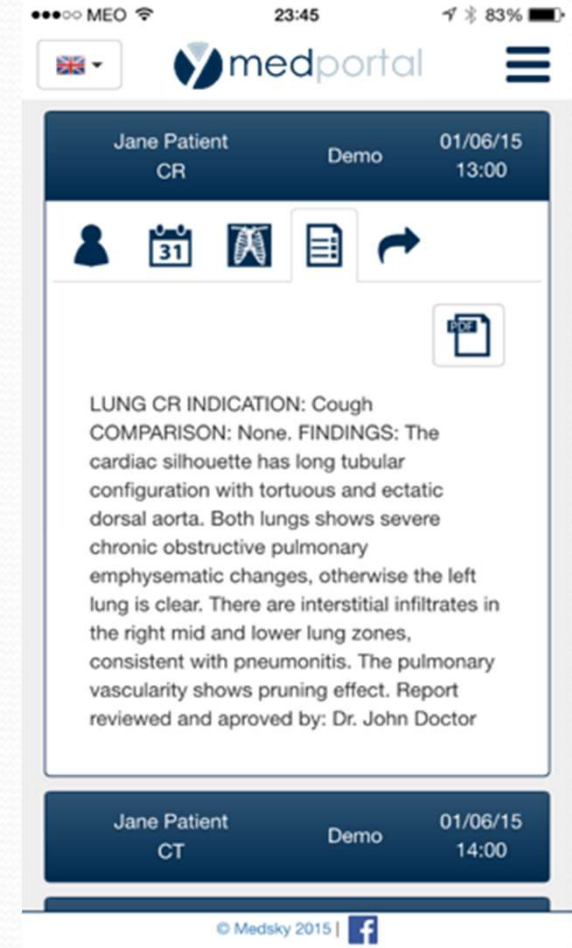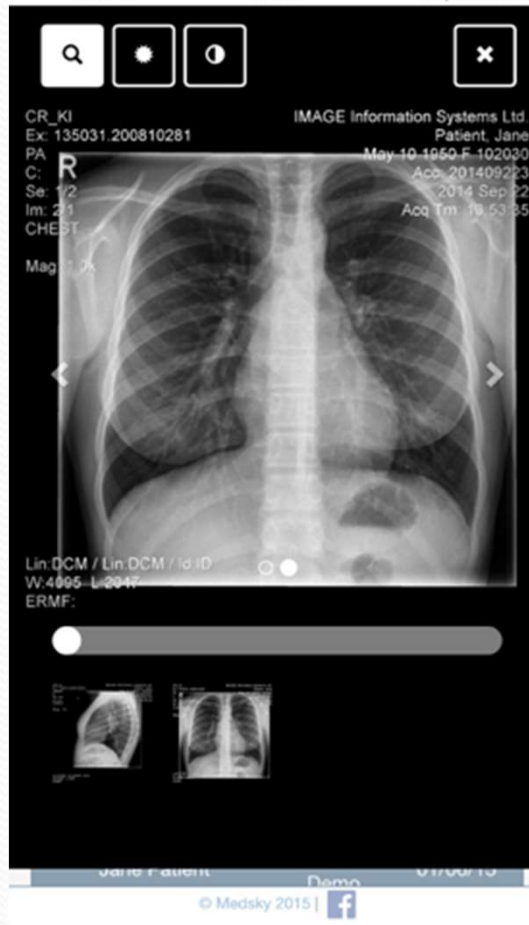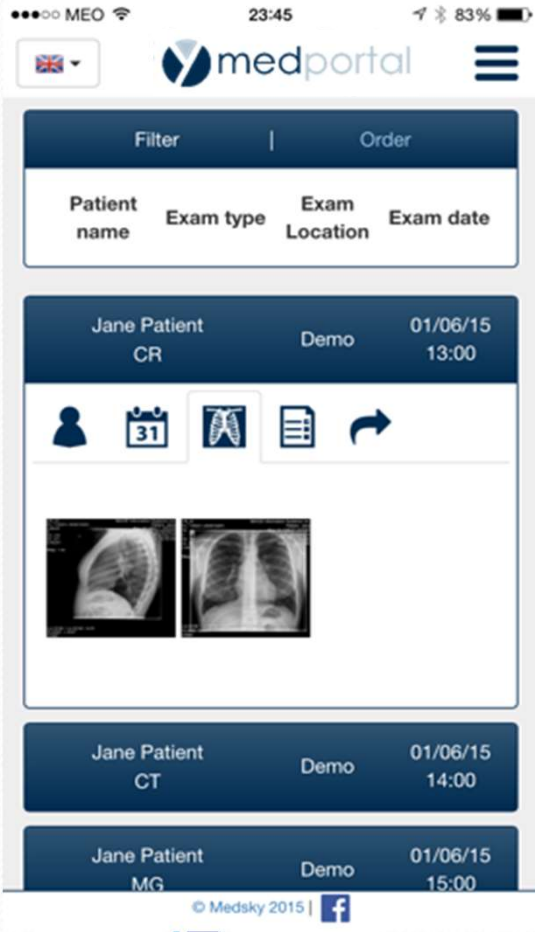


**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

1 2



Previous 1 2 Next

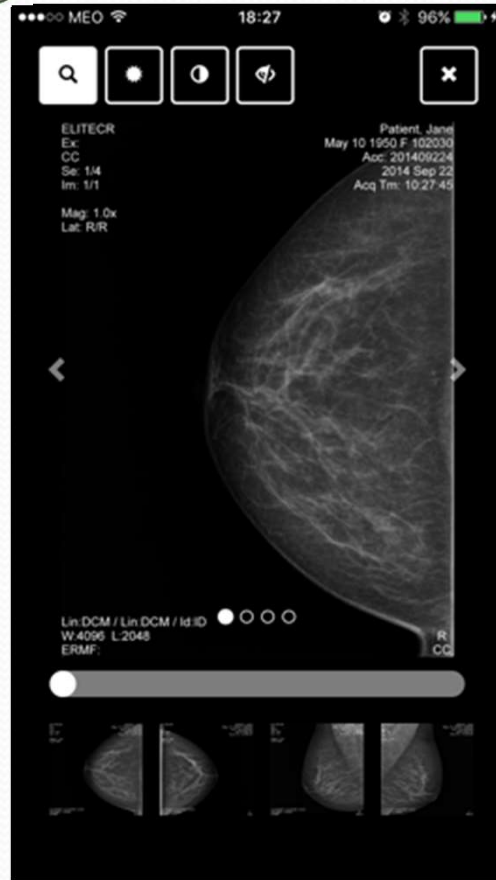


**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

# Esquema de Integración

1 2


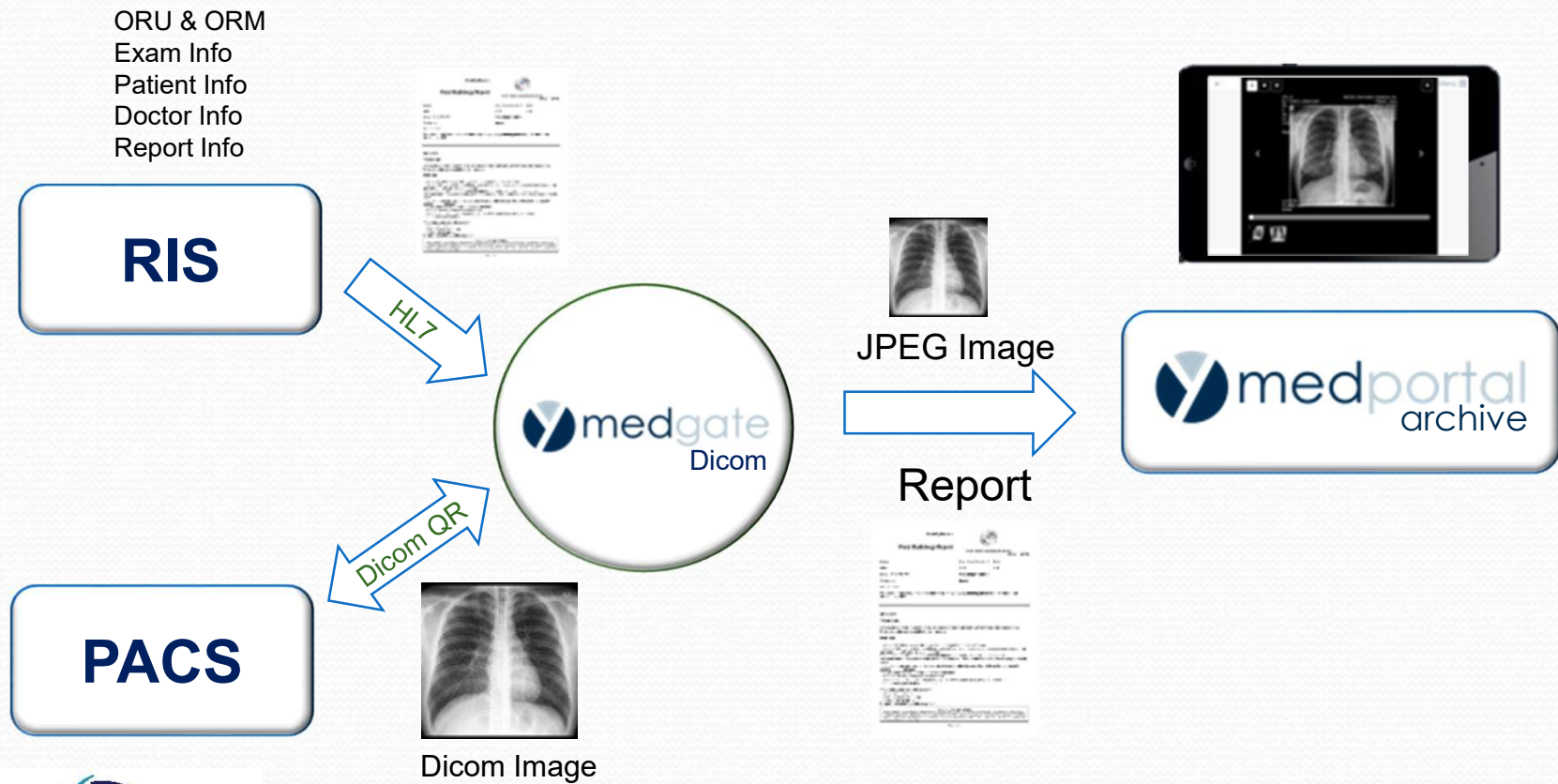


**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

# MEDPORTAL UniViewer 3

## Zero Footprint Viewer

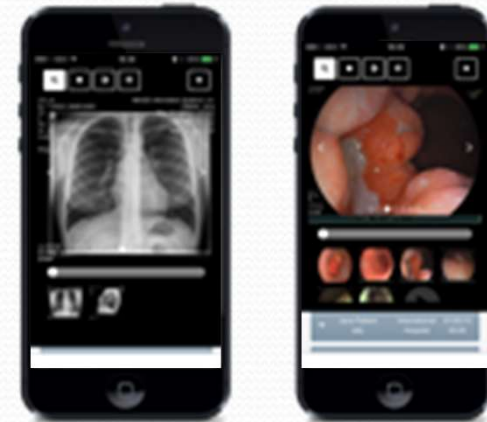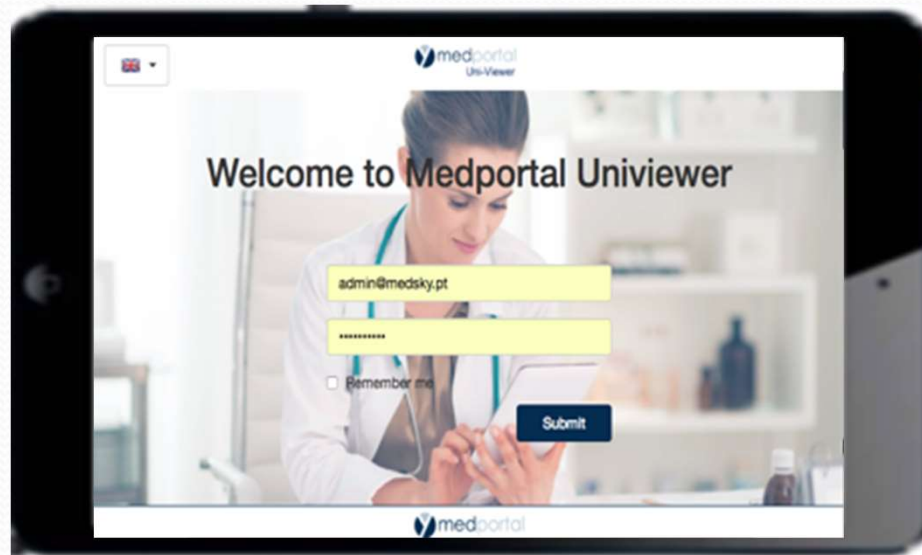

## MOBILE Viewer



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD

4

 medportal  
teleradiology

Médico  
Radiólogo




Selección de  
exámenes para  
Teleradiología

 medgate

Dicom Query  
Retrieve

**PACS**

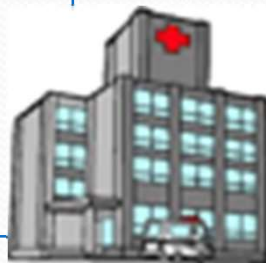

**RIS**

**PACS**

Template de reportes  
Dictado de Informes  
Reconocimiento de voz  
Herramientas  
avanzadas de PACS



**GRIENSU**

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA SALUD